Sutura Adesiva DERMAZIP

Cicatrização com eficácia



Introdução à Sutura Adesiva Dermazip



A sutura adesiva Dermazip é um sistema de fechamento de feridas que tem se tornado cada vez mais popular em procedimentos cirúrgicos, especialmente em casos de pequenas incisões. O sistema envolve o uso de uma fita adesiva com fechos ajustáveis que é aplicada diretamente na pele para unir as bordas da ferida.

Apresentações

Pequeno

25 x 10 mm



Médio

28 x 17mm




Grande

138 x 32 mm



Informações técnicas

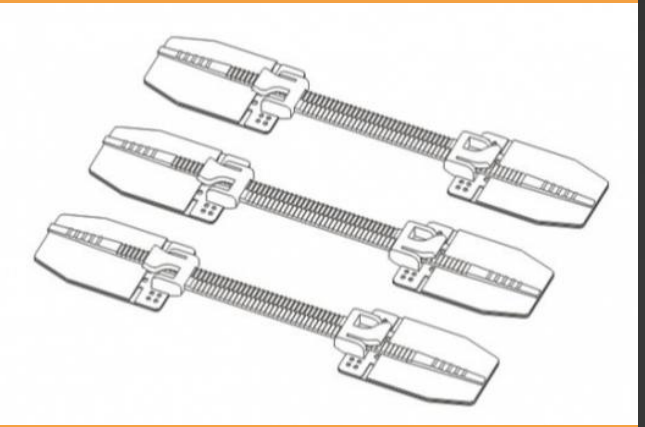

Descrição do produto	Sistema de fechamento de feridas
Composição	Fecho PP, fitas médicas, e papel anti-adesivo
Tamanhos	Pequeno, Médio e Grande.
Nr. De Registro	CFDA20162640613
Características	Para fechamento de feridas em diferentes partes do corpo. Sem suturas, agrafos e colas


Sem agulhas, sem fios e sem cola.
Sem pontos e sem danos à pele preservada.
Reduz a formação de quelóides.









Reversível e ajustável

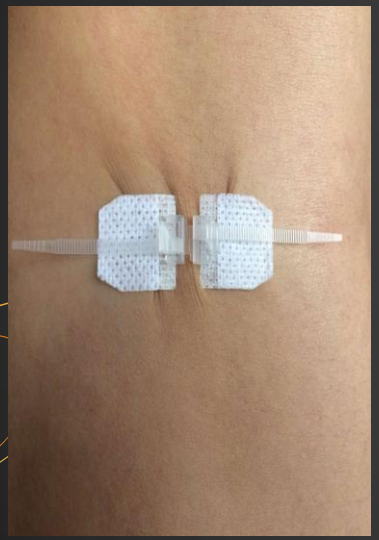

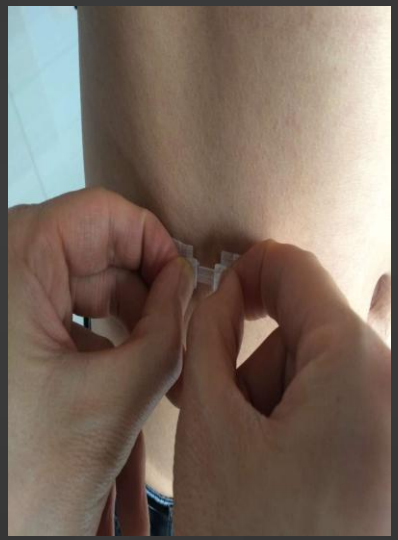

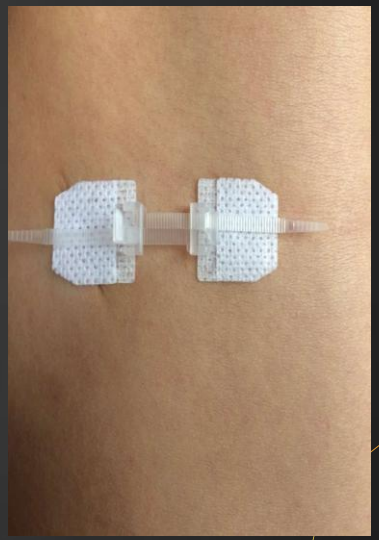

Usado em feridas irregulares e de diferentes formas







Cirurgia Obstétrica (Cesária)

- ✓ Reduz as dores no paciente.
- ✓ Reduz a formação de quelóides.

Cirurgia de cabeça e pescoço (Tireóide)







- ✓ Uso fácil e simples.
- ✓ Sem danos as bordas cutâneas.
- ✓ Acelera a cicatrização e proporciona menor tempo de hospital.

Cirurgia Geral (Laparoscopia)









Ferimentos / Lacerações na face









Cirurgia ortopédica (Mão)











Feridas abdominais abertas
Feridas de difícil cicatrização

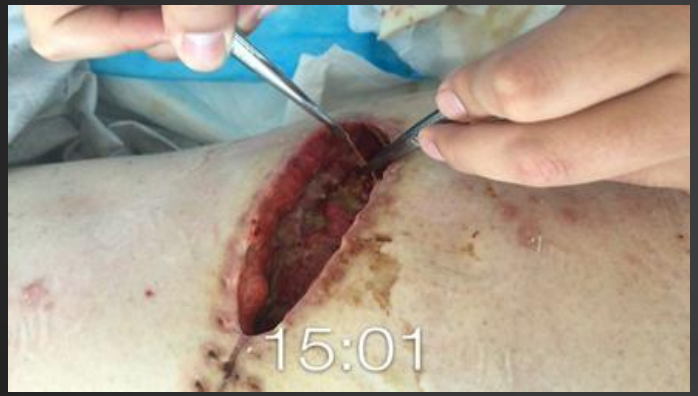



Cirurgia geral (Hérnia Inguinal)

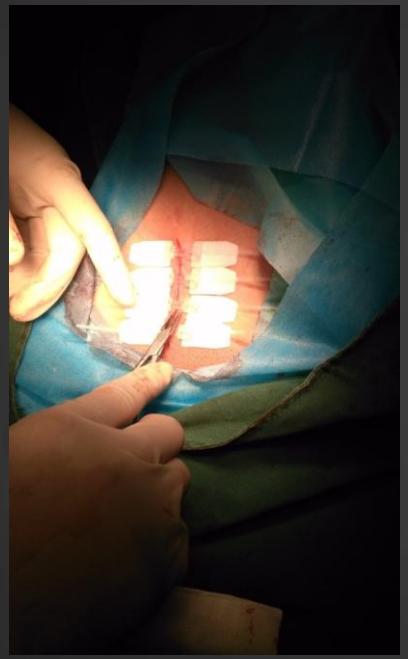



Cirurgia oncológica (Fistulização de carcioma de cólon)



Cirurgia dermatológica (Abscesso)









Tratamento de feridas infectadas







Tratamento de feridas abertas

Após cirurgia



1° dia de uso




Tratamento de feridas abertas

4° dia



10° dia

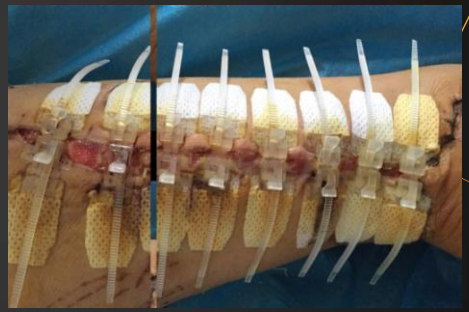


Tratamento de feridas abertas

Após cicatrização



Ferimentos superficiais



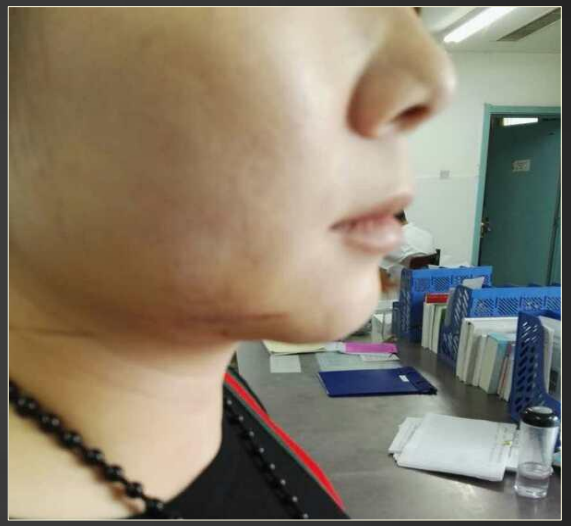


Modo de usar

Suturas profundas com pontos subcutâneos



Modo de usar

Limpeza das feridas

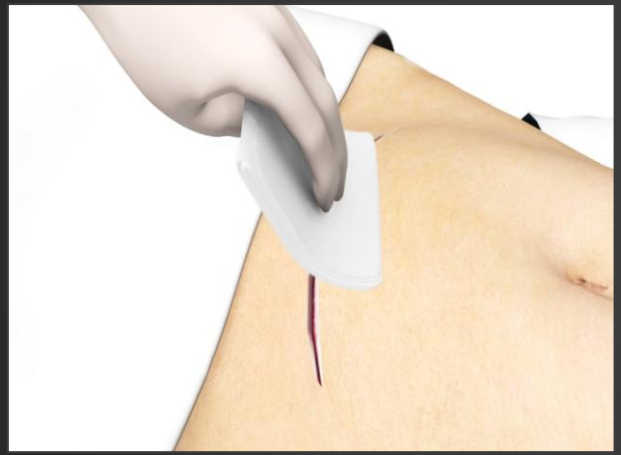




Lave a ferida e deixe
o local limpo e seco.

Modo de usar

Segure na haste central

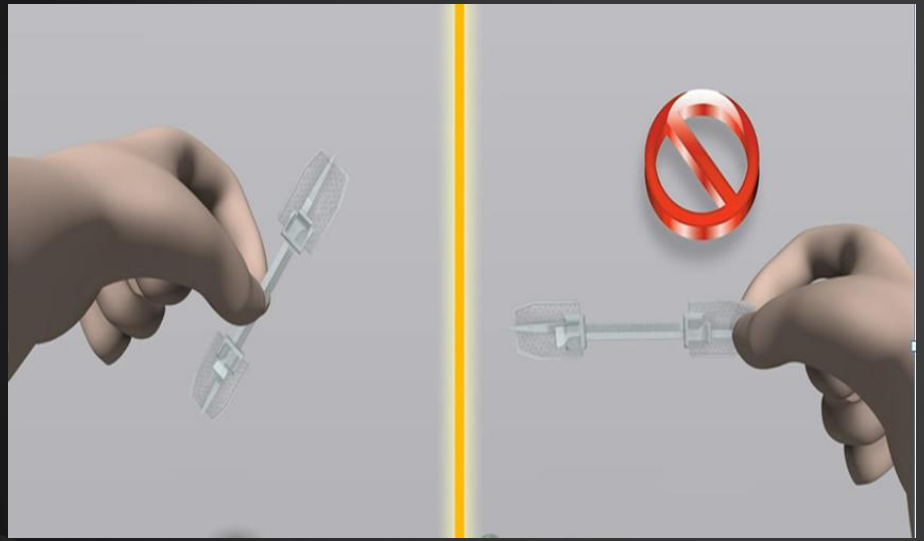

Sem contato com a fita adesiva

Modo de usar

Pressione a ferida de forma adequada




A distância entre as bordas cutâneas deve ser menor que 1 cm

Modo de usar

Coloque o DERMAZIP sobre a ferida



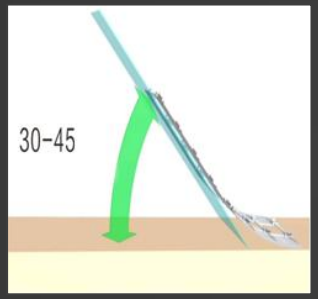

Mantenha o ângulo de 30-45°

Antes de colocar sobre a ferida, mantenha a mesma limpa e seca.

Este produto é descartável.

NÃO PODE SER REUTILIZADO.

Modo de usar


Pressione as fitas e fixe o DERMAZIP sobre a ferida



Pressione a parte de trás das fitas e cole firmemente na pele.

Modo de usar


Puxe os fechos e vede a ferida

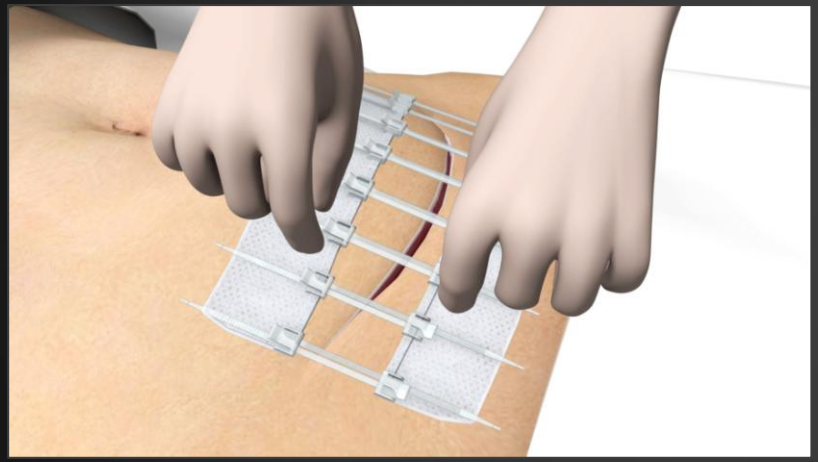

Puxe firmemente as extremidades para fechamento da ferida

Modo de usar


Regule os fechos

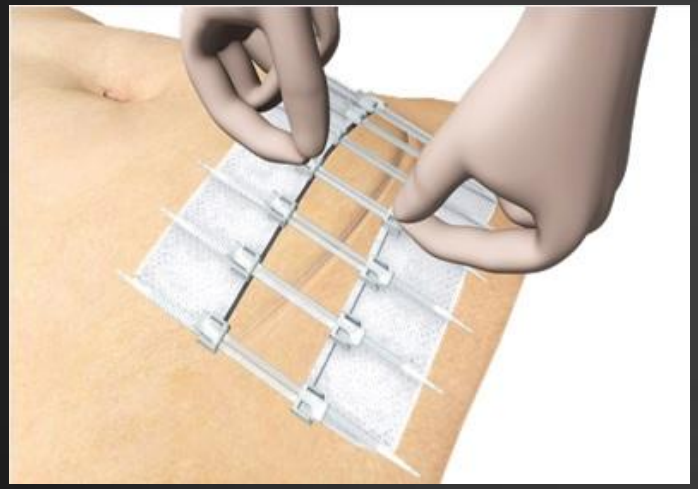

Se estiver muito apertado, pode-se ajustar os fechos.

Modo de usar


Alinhe as bordas cutâneas

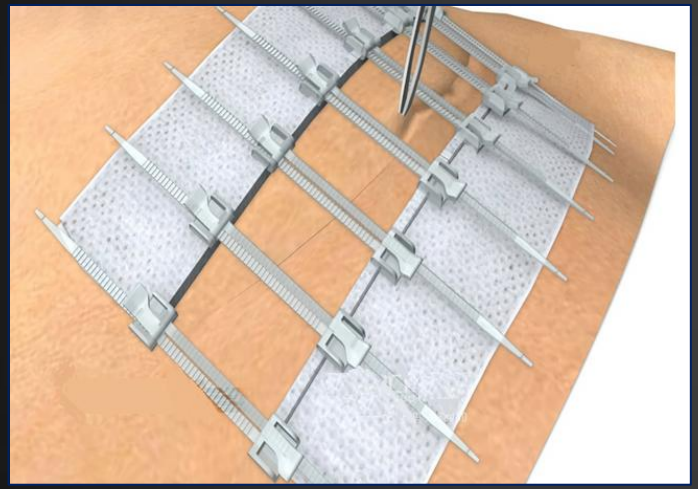

As bordas cutâneas devem ser mantidas lisas e limpas.

Modo de usar


Demarcação

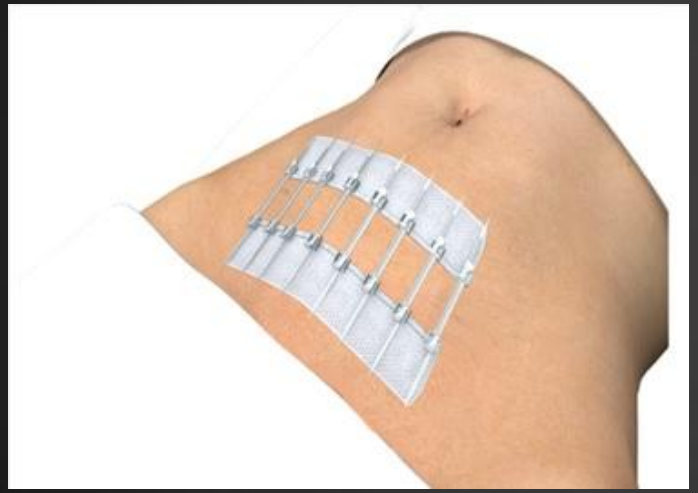


As bordas cutâneas devem manter distância das fitas.

Modo de usar

Forma correta

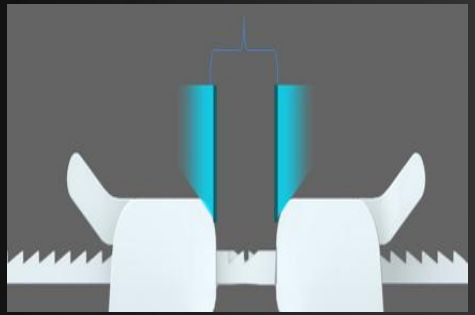

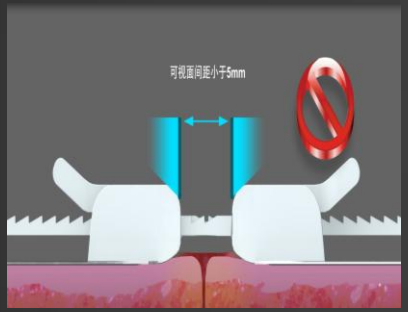

Mantenha distância entre dois fechos de 1 cm de área visível.

Se os fechos estiverem muito próximos, dificulta o manuseio e a observação da ferida.

Modo de usar

Coloque um curativo estéril externamente




Use curativos para cobrir toda ferida.

<u>TROCA DO CURATIVO</u>:
Siga as orientações Médicas.
Use solução antisséptica.
Manter o curativo limpo.
Retirar o DERMAZIP somente após a cicatrização total da ferida.

Modo de usar

Feridas irregulares

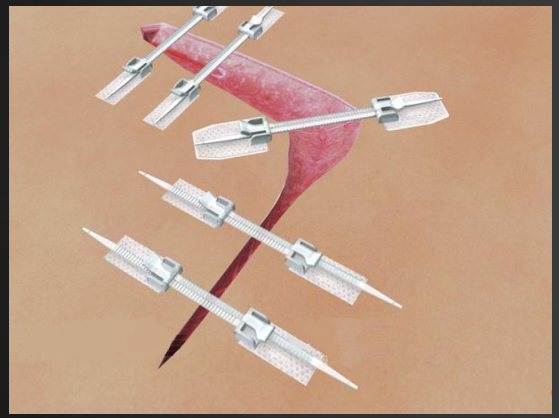

Use diferentes kits de acordo com a forma.

Realizar tricotomia (remoção dos pelos) para melhor adesão das fitas.

Evitar grande amplitude de movimento quando utilizado em regiões de articulações.

Distribuidor exclusivo no Brasil



Nutrimex International

Obrigado!

Você tem alguma dúvida?

contato@nutrimex.com.br
+55 41 3052-9592
nutrimex.com.br

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik**